

40 mm

VISCOPASTE™ PB7

Sinkpasta-bandasje BP

Beskrivelse
VISCOPASTE PB7 bandasje er laget av åpent, levd materiale som er impregneret med en pasta som inneholder 10 % sinkoksid rullet på en plastkjerne. Den inneholder også sterilt vann, glyserol, cetostearylalkohol, cetomacrogol, hvittolje, guarbjergemel, xantangummi, metyl-p-hydroksibenzoat og propyl-p-hydroksybenzoat. Hver bandasje leveres emballert og forseglet i en polyetylenpose i inne i en pappekse.

Virkningsmåte
VISCOPASTE PB7 brukes til topisk behandling. Den oppretter et fuktig sårhelingsmiljø over bensår og bidrar til å redusere hudirritasjon samt lindrer og beskytter omkringliggende hud. Bandasjen tørker ikke ut under bruk.

Indikasjoner
VISCOPASTE PB7 er indisert til bruk ved venøse bensår. Ved venøs insuffisiens, bør pastabandasjen brukes under gradert kompresjonsbandasje. VISCOPASTE PB7 er også egnet til bruk ved håndtering av kronisk eksem/dermatitt, der okklusjon er indisert.

Kontraindikasjoner
Må ikke brukes ved kjente tilfeller av overfølsomhet eller allergi for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Der det foreligger venøs insuffisiens, bør VISCOPASTE PB7 brukes under gradert kompresjonsbandasje, etter at pasienten først er vurdert for å utelukke arteriell sykdom. Bruk av Doppler-ultra lyd anbefales til dette formålet. Kompresjonsbandasje bør ikke brukes til pasienter som har arteriell sykdom (ABPI <0,8) og er ikke anbefalt til bruk på diabetiske pasienter med fremskredet sykdom i små blodkar.

Manglende oppdagelse av redusert arterieflukt kan føre til trykknese, amputering eller til og med dødsfall. Risikoen for at pasienter både har arteriell og venøs sykdom øker med alderen.

Huden til pasienter med bensår blir lett sensibilisert for topiske legemidler samt konserveringsmidler. Sensibilisering bør mistenkes hos pasienter, særlig der omkringliggende hud er forringet. Slike pasienter bør henvises til spesialist, blant annet for prikktesting. En av funksjonene til okkluderende bandasjer er å øke absorpsjonen. Det må derfor utvises forsiktighet dersom det besluttes å påføre topiske steroide, anestetiske eller retinoide preparater under bandasjen, da absorpsjonen av disse kan økes signifikant. Dette kan føre til kortere effektivitet for anestetisk produkt i tillegg til å øke risikoen for sensibilisering for disse preparatene. Kun til topisk bruk. VISCOPASTE PB7 er et engangsprodukt. Hvis det brukes på mer enn én pasient, kan krysskontaminering eller infeksjon oppstå. Vid brukingen er åpent,

bør derfor eventuelt ubrukt materiale kastes, og skal ikke spares til bruk for en senere anledning.

Instruksjoner vedrørende bruk
1. Dette produktet er klart til bruk når det er tatt ut av den foreslåede posen og emballasjen.

2. Bandasjen kan påføres på to måter.

1. Begynn nederst ved tærne, og vikle bandasjen løst rundt foten, hælen og benet, som en spiral, til rett under kneet. Når bandasjen er satt på, glattes den ut og formes rundt benet.

2. Begynn nederst ved tærne, og vikle bandasjen løst rundt foten og hælen. Vikle så fra ankelen, og for hver runde foldes bandasjen tilbake over seg selv, med en fold foran på benet. Dette gjentas oppover benet til rett under kneet. Kompresjonsbandasje kan brukes over. Når VISCOPASTE PB7 er påført, dekkes benet med en bandasje eller gasbind, slik at ikke klærne tilsløres.

3. Bandasjeskift utføres etter behov, produktet kan være på såret i inntil 7 dager.

Mulige bivirkninger: VISCOPASTE PB7 kan gi bivirkninger, men ikke alle får dem. Har blitt rapportert:

- lokale hudreaksjoner som utslett, rødhet, kloe og en brennende følelse.

Produkttilgjengelighet

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Kode | Størrelse | Tilgjengelighet |
| 4948 | 7,5cm x 6m | Eske på 1 |
| Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige | | |
| Varemærke tilhørende Evolan Pharma AB | | |
| ©Evolan Pharma AB Utgivelsesdato 08/2024 | | |
| Produsert i Romania | | |



VISCOPASTE™ PB7

Sinkpastasidos Kuvau

VISCOPASTE PB7 -sidos on valmistettu harvaan kudotusta kankaasta, joka on kyllästetty 10% sinkkioksidilla sisältävällä pastalla ja rullattu muoviseen siiposaan. Se sisältää myös puhdasta vettä, glyserolia, setostearyylialkoholia, setomacrogolia, valkokiilijä, guariumia, ksantaanikumiä, metyyli-p-hydroksibensoattia ja propyyli-p-hydroksibensoattia. Jokainen sidos toimitetaan enillissessä kääreessä ja suljettuna polyeeteenipussissa, joka on laitetu pahvikatelon.

Toimintamekanismi
VISCOPASTE PB7 -sidosta käytetään paikallisesti. Se antaa kostean haavaa parantavan ympäristön säänihaavalle, auttaa vähentämään ihon ärsytystä sekä rauhoittaa ja suojaa ympäröivää ihoa. Se ei kiuvu käyttössä.

Käyttöaiheet
VISCOPASTE PB7 on tarkoitettu avuksi laskimoperäisten, säänihaavojen hoidossa. Kun esiintyy laskimoiden toiminnan vajausta, pastasidosta tulisi käyttää

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Koodi | Koko | Saatavana |
| 4948 | 7,5cm x 6m | 1 kpl pahvikatelo |
| Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, | | |

asteittaisen kompres-siosidoksen alla. VISCOPASTE PB7 sopii myös kroonisen ekseeman/dermatitin hoitoon, kun okklusio on aiheellista.

Vasta-aiheet
Älä käytä, jos potilaan tiedetään olevan herkistynyt tai allerginen jollekin tuotteen valmistusaineelle.

Vaaroitukset
Kun potilaalla on laskimoiden toiminnan vajausta, tulisi VISCOPASTE PB7 -sidettä käyttää asteittaisen kompresiosidoksen alla sen jälkeen, kun potilaan tila on ensin arvioitu verisuontautiin mahdollisuuden poissulkemiseksi. Doppler-ultraäänin käyttöä suositellaan tähän tarkoitukseen. Kompresiosidosta ei tule käyttää potilailla, joilla on verisuontauti (ABPI <0,8) eikä sitä suositella käytettäväksi diabetes-potilailla, joilla on pitkäle edennyt pienten verisuonten sairaus. Mikäli vähentynyt valtimon verenvirtaus ei halvata, voi seurauksena olla paan aiheuttama nekroosi, amputaatio tai jopa kuolema. Potilaan vaara saadaan verisuoni- ja laskimoperäisten sairauksa iän myötä.

Säänihaavapotilaan iho herkistyy helposti paikallisille lääkityksille, myös säilytysaineille. Herkistymistä tulee epäillä potilailla erityisesti silloin, kun ympäröivän ihon tila on pahentunut. Tällaiset potilaat tulisi lähettää erikoisdiagnoosiin, mukaan lukien lapputestin. Yksi bklkusiivsen sidoksen toimintamuodosta on imeytymisen lisääminen. Tästä syystä tulisi noudattaa varovaisuutta, jos sidoksen alla päättään käyttää paikallista steroidia, puudutusainetta tai retinoideja, koska niiden imeytyminen saattaa kasvaa huomattavasti, mikä johtaa puudutusaineen vaikutuksen lyhyempään keston ja lisäksi suurempaan herkistymisvaaraan näille valmistelle. Ainoastaan paikalliskäyttöön. VISCOPASTE PB7 on kertakäyttöinen tuote. Jos sitä käytetään useammalla kuin yhdellä potilaalla, riskikontaminaation tai infektion vaara on plmassa. Kun pakkaus on avattu, käyttämätöntä tuotetta ei tule säilyttää myöhempää käyttöä varten.

Käyttöohjeet: Tämä tuote on käytettävissä, kun suljettu pussi ja kääre on poistettu. Sidos voidaan kiinnittää kahdella eri tavalla:

1. Aloittaan varpaiden juuresta sidos tulisi kiittää fyysistä jalkaterän ja kantapään ympärille sekä epäluomaisesti säären ympärille avian polven alapuolella asti. Kun sidos on asetettu paikalleen, sitä tulisi tasoaittaa ja muuata jalan ympärille.


2. Aloittaan varpaiden juuresta sidos tulisi kiittää fyysistä jalkaterän ja kantapään ympärille, ja sen jälkeen nilkasta kiertämällä sidos tulisi taittaa joka kierroksella takaisin siten, että muodostetaan taitos säären etupuolelle. Tämä tulisi toistaa koko säären osalta avian polven alapuolella asti. Kompresiosidosta voidaan käyttää tämän jälkeen. Kun VISCOPASTE PB7 on asetettu paikalleen, jalka tulisi peittää toissijaisella sidoksella, jotta estetäisiin vaateidenhirttuminen.

3. Vainda sidos tarvittaessa. Voidaan käyttää 7 päivää. **Mahdolliset häitävälukutukset:** VISCOPASTE PB7 on mahdollista saada häitävälukutuksia, mutta useimmiten johtuu rortoitajista:

- paikallinen ihon ihottuma, punoitus, kutiaminen ja lämpö.

Tuotteen saatavuus

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Koodi | Koko | Saatavana |
| 4948 | 7,5cm x 6m | 1 kpl pahvikatelo |
| Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, | | |

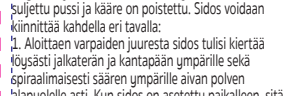

182 12 Danderyd, Ruotsi
™Evolan Pharma AB -yhitiön tavaramerkki ©Evolan Pharma AB
Julkaisupäivämäärä 08/2024
Valmistettu Romania



VISCOPASTE™ PB7

Zinklims bandage BP

Beskrivning
VISCOPASTE PB7 bandage är tillverkat av tyg i öppen väv, impregnerat med en pasta som innehåller 10% zinkoxid upprullat på en plastulra. Det innehåller även vatten, glyserol, cetostearylalkohol, cetomacrogol, vit olja, guar gummi, xantangummi, metyl-p-hydroxybenzoat och propyl-p-hydroxybenzoat. Varje bandage har ett skyddsomslag och ligger i en försejlad polyetenpåse i en pappkartong.


Verkningsmekanism
VISCOPASTE PB7 ger lokal behandling. Den ger fuktig sårkringsmiljö på bensår, bidrar till minskad hudirritation samt lindrar och skyddar omgivande hud. Den torkar inte ut vid användning.

Indikationer
VISCOPASTE PB7 är indicerat för att underlätta behandling av venösa bensår. Då venös insufficiens förekommer, skall zinkbandaget användas under gradert kompresjonsbanda- gering. VISCOPASTE PB7 är även lämpligt att använda vid behandling av kronisk eksem/dermatit, då okklusjon är indicerad.

Kontraindikationer
Används inte vid känd känslighet eller allergi mot något av innehållsstoffna.

Försiktighet
Då venös insufficiens förekommer, skall VISCOPASTE PB7 användas under gradert kompresjonsbanda- gering, efter att först ha bedömt patienten för att utesluta arteriell sjukdom. För detta rekommenderas användning av ankelindexmätning. Kompresjons- bandagening skall inte användas på patienter som har arteriell sjukdom (Ankelindex <0,8) och rekommenderas inte för användning på diabetespatienter med framskriden kärlsjukdom i små blodkärl. **Om inte arteriell insufficiens upptäcks, kan det medföra trykknese, amputation eller till och med död.**

Risken för att en patient ska ha en arteriell och en venös sjukdom ökar med åldern. Huden hos patienter med bensår blir lätt sensibiliserad för lokala läkemedel, inklusive konserveringsmedel. Sensibilisering bör speciellt misstänkas hos patienter där det förekommer försämring av den omgivande huden. Sådana patienter skall remitteras till specialist för diagnos, inklusive lapptest. En av funktionerna hos läkemedlet är att minska irritationen och skyddar huden. Detta kan leda till kortare effektivitet av en anestetisk produkt, förutom ökad risk för sensibilisering för dessa preparat. Enbart för lokal användning. VISCOPASTE PB7 är en engangsprodukt. Om den används på mer än en patient korskontaminering och

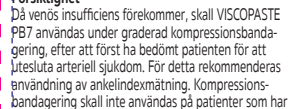

infektion uppstå. Vid bruten förpackning bröstis den sterila barriären och förbandet.

Bruksanvisning: Denna produkt är klar att använda när den har avlägsnats från den försejda påsen och skyddsomslaget. Det finns två sätt att applicera bandaget:

1. Börja vid basen av tårna och linda bandaget löst runt fot, häl och ben på ett spiralformigt sätt upp till alldeles under knäet. När bandaget har applicerats, ska det slätas till och formas runt benet.

2. Börja vid basen av tårna och linda bandaget löst runt fot och häl och därefter, medan det lindas från wristen, viks bandaget vid varje varv tillbaka över sig själv i ett veck på benets framsida. Detta ska upprepas, längs med benet upp till alldeles under knäet. Därefter, kan kompresjonsbandagening ske. När VISCOPASTE PB7 har applicerats, ska benet täckas med bandage eller förband för att förhindra att kläderna solkas ner. Byt förbandet beroende vid behov. Förbandet kan sitta på plats upp till 7 dagar.

Möjliga biverkningar: VISCOPASTE PB7 kan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Har rapporterats: •lokala hudreaktioner såsom utslag, rodnad, klåda och svæda.

Produkttillgänglighet

| | | |
|--|------------|----------------|
| Kod | Storlek | Tillgänglighet |
| 4948 | 7,5cm x 6m | Kartong med 1 |
| Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige | | |
| ™Evolan Pharma AB | | |
| ©Evolan Pharma AB | | |
| Texten reviderad den 08/2024 | | |
| Tillverkad i Rumänien | | |



VISCOPASTE™ PB7

Ligadura com pasta de zinco


Descrição
A ligadura VISCOPASTE PB7 é fabricada com tecido de textura aberta impregnado com uma pasta de 10% de Óxido de Zinco, que é enrolado em volta de um núcleo de plástico. Também contém Água Purificada, Glicerol, Alcool Cetostearylalcol, Cetomacrogol, Oleo Branco, Goma de Guar, Goma Xantana, Metil-p-hidroxi-benzoato e Propil-p-hidroxi-benzoato. Cada ligadura está envolvida por um invólucro e selada numa bolsa de polietileno que por sua vez está dentro de uma caixa de cartão.

Modo de acção: VISCOPASTE PB7 é um tratamento tóxico. Aplicada sobre a úlcera de perna proporciona um ambiente húmido para a cicatrização da ferida. Ajuda a reduzir a irritação cutânea e acalma e protege a pele em redor da úlcera. Não seca durante a utilização, e a ligadura de acordo com a necessidade. Pode ser usado, até 7 dias.


Fretos indesejáveis possíveis: VISCOPASTE PB7 pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas. Foram notificados: • reacções cutâneas locais, tais como erupção cutânea, eritema, prurido e ardor.

Disponibilidade do Produto

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Código | Tamanho | Disponibilidade |
| 4948 | 7,5cm x 6m | Caixa de 1 unidade |
| Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, | | |

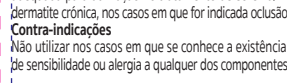

182 12 Danderyd, Ruotsi
™Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suécia.
™Marca Registrada Evolan Pharma AB
©Evolan Pharma AB
Data de emissão 08/2024 .
Fabricado na Roménia

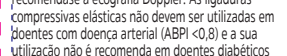

VISCOPASTE™ PB7

Çinko macun bandaj

Tanım
VISCOPASTE PB7 bandaj plastik bir makaraya sarılı 10% Çinko Oksit içeren bir pasta emdirilmiş seyrek dokumalı bir bezden oluşur. Ayrıca Saf Su, Giserol, Setosteareil alkol, Setomacrogol, Beyaz Yağ, Guar Sakızı, Kantan Sakızı, Metil-p-hidroksibenzoat ve Propil p-hidroksibenzoat içerir. Her bandaj ayrı ayrı ambalajlanarak, karton bir kutu içerisindeki kapalı bir polietilen torbaya konmuştur.

Etki mekanizması
VISCOPASTE PB7 topikal tedavi sağlar. Bir bacak ülseri üzerinde yararın iyileşmesi için nemli bir ortam sağlar, dilt tahrişini azaltmaya yardımcı olur ve yararın çevrebindiği dildi rahatlatır ve korur. Kullanılabilir kururuz.

Endikasyonları
VISCOPASTE PB7 venöz bacak ülserlerinin tedavisinde kullanılmak üzere endikedir. Venöz yetmezlik varsa pasta bandajı aşamalı kompresyon bandajı altında kullanılmalıdır. VISCOPASTE PB7 ayrıca oklüzyonun endike olduğu kronik egzema/dermatit tedavisinde de kullanıma uygundur.

Kontraindikasyonları
VISCOPASTE PB7 venöz bacak ülserlerinin tedavisinde kullanılmak üzere endikedir. Venöz yetmezlik varsa pasta bandajı aşamalı kompresyon bandajı altında kullanılmalıdır. VISCOPASTE PB7 ayrıca oklüzyonun endike olduğu kronik egzema/dermatit tedavisinde de kullanıma uygundur.

İnstruksiyonları
Este produto está pronto a ser utilizado depois de removido da bolsa selada e do seu invólucro. A ligadura pode ser aplicada de duas maneiras:


1. Começando pela raiz dos dedos do pé, enrolar a ligadura sem apertar em volta do pé, do calcâneo e em volta da perna seguindo um movimento em espiral até imediatamente abaixo do joelho. Uma vez aplicada, a ligadura esta deve ser seguidamente alisada e "moldada" em volta da perna.

2. Começando pela raiz dos dedos do pé, enrolar a ligadura sem apertar em volta do pé, do calcâneo e em seguida, ao mesmo tempo que enrola a ligadura a partir do tornozelo, dobrar a ligadura sobre si mesma em cada volta formado uma prega na frente da perna. Isto repete-se ao longo da perna até imediatamente abaixo do joelho. Em seguida pode aplicar-se uma ligadura compressiva elástica. Assim que se aplicar VISCOPASTE PB7 a perna deve ser coberta por uma ligadura ou penso para evitar sujar a roupa. Pode a ligadura de acordo com a necessidade. Pode ser usado, até 7 dias.

Efeitos indesejáveis possíveis: VISCOPASTE PB7 pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas. Foram notificados: • reacções cutâneas locais, tais como erupção cutânea, eritema, prurido e ardor.

Disponibilidade do Produto

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Código | Tamanho | Disponibilidade |
| 4948 | 7,5cm x 6m | Caixa de 1 unidade |
| Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, | | |

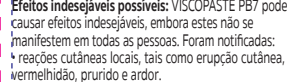

182 12 Danderyd, Ruotsi
™Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suécia.
™Marca Registrada Evolan Pharma AB
©Evolan Pharma AB
Data de emissão 08/2024 .
Fabricado na Roménia



VISCOPASTE™ PB7

Çinko macun bandaj

Tanım
VISCOPASTE PB7 bandaj plastik bir makaraya sarılı 10% Çinko Oksit içeren bir pasta emdirilmiş seyrek dokumalı bir bezden oluşur. Ayrıca Saf Su, Giserol, Setosteareil alkol, Setomacrogol, Beyaz Yağ, Guar Sakızı, Kantan Sakızı, Metil-p-hidroksibenzoat ve Propil p-hidroksibenzoat içerir. Her bandaj ayrı ayrı ambalajlanarak, karton bir kutu içerisindeki kapalı bir polietilen torbaya konmuştur.

Etki mekanizması
VISCOPASTE PB7 topikal tedavi sağlar. Bir bacak ülseri üzerinde yararın iyileşmesi için nemli bir ortam sağlar, dilt tahrişini azaltmaya yardımcı olur ve yararın çevrebindiği dildi rahatlatır ve korur. Kullanılabilir kururuz.

Endikasyonları
VISCOPASTE PB7 venöz bacak ülserlerinin tedavisinde kullanılmak üzere endikedir. Venöz yetmezlik varsa pasta bandajı aşamalı kompresyon bandajı altında kullanılmalıdır. VISCOPASTE PB7 ayrıca oklüzyonun endike olduğu kronik egzema/dermatit tedavisinde de kullanıma uygundur.

Kontraindikasyonları
VISCOPASTE PB7 venöz bacak ülserlerinin tedavisinde kullanılmak üzere endikedir. Venöz yetmezlik varsa pasta bandajı aşamalı kompresyon bandajı altında kullanılmalıdır. VISCOPASTE PB7 ayrıca oklüzyonun endike olduğu kronik egzema/dermatit tedavisinde de kullanıma uygundur.

İnstruksiyonları
Este produto está pronto a ser utilizado depois de removido da bolsa selada e do seu invólucro. A ligadura pode ser aplicada de duas maneiras:


1. Começando pela raiz dos dedos do pé, enrolar a ligadura sem apertar em volta do pé, do calcâneo e em volta da perna seguindo um movimento em espiral até imediatamente abaixo do joelho. Uma vez aplicada, a ligadura esta deve ser seguidamente alisada e "moldada" em volta da perna.

2. Começando pela raiz dos dedos do pé, enrolar a ligadura sem apertar em volta do pé, do calcâneo e em seguida, ao mesmo tempo que enrola a ligadura a partir do tornozelo, dobrar a ligadura sobre si mesma em cada volta formado uma prega na frente da perna. Isto repete-se ao longo da perna até imediatamente abaixo do joelho. Em seguida pode aplicar-se uma ligadura compressiva elástica. Assim que se aplicar VISCOPASTE PB7 a perna deve ser coberta por uma ligadura ou penso para evitar sujar a roupa. Pode a ligadura de acordo com a necessidade. Pode ser usado, até 7 dias.


Efeitos indesejáveis possíveis: VISCOPASTE PB7 pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas. Foram notificados: • reacções cutâneas locais, tais como erupção cutânea, eritema, prurido e ardor.

Disponibilidade do Produto

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Código | Tamanho | Disponibilidade |
| 4948 | 7,5cm x 6m | Caixa de 1 unidade |
| Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, | | |

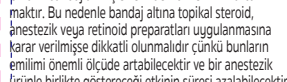

182 12 Danderyd, Ruotsi
™Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suécia.
™Marca Registrada Evolan Pharma AB
©Evolan Pharma AB
Data de emissão 08/2024 .
Fabricado na Roménia

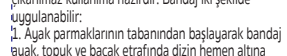

VISCOPASTE™ PB7

Çinko macun bandaj

Tanım
VISCOPASTE PB7 bandaj plastik bir makaraya sarılı 10% Çinko Oksit içeren bir pasta emdirilmiş seyrek dokumalı bir bezden oluşur. Ayrıca Saf Su, Giserol, Setosteareil alkol, Setomacrogol, Beyaz Yağ, Guar Sakızı, Kantan Sakızı, Metil-p-hidroksibenzoat ve Propil p-hidroksibenzoat içerir. Her bandaj ayrı ayrı ambalajlanarak, karton bir kutu içerisindeki kapalı bir polietilen torbaya konmuştur.

Etki mekanizması
VISCOPASTE PB7 topikal tedavi sağlar. Bir bacak ülseri üzerinde yararın iyileşmesi için nemli bir ortam sağlar, dilt tahrişini azaltmaya yardımcı olur ve yararın çevrebindiği dildi rahatlatır ve korur. Kullanılabilir kururuz.

Endikasyonları
VISCOPASTE PB7 venöz bacak ülserlerinin tedavisinde kullanılmak üzere endikedir. Venöz yetmezlik varsa pasta bandajı aşamalı kompresyon bandajı altında kullanılmalıdır. VISCOPASTE PB7 ayrıca oklüzyonun endike olduğu kronik egzema/dermatit tedavisinde de kullanıma uygundur.

Kontraindikasyonları
VISCOPASTE PB7 venöz bacak ülserlerinin tedavisinde kullanılmak üzere endikedir. Venöz yetmezlik varsa pasta bandajı aşamalı kompresyon bandajı altında kullanılmalıdır. VISCOPASTE PB7 ayrıca oklüzyonun endike olduğu kronik egzema/dermatit tedavisinde de kullanıma uygundur.

İnstruksiyonları
Este produto está pronto a ser utilizado depois de removido da bolsa selada e do seu invólucro. A ligadura pode ser aplicada de duas maneiras:


1. Começando pela raiz dos dedos do pé, enrolar a ligadura sem apertar em volta do pé, do calcâneo e em volta da perna seguindo um movimento em espiral até imediatamente abaixo do joelho. Uma vez aplicada, a ligadura esta deve ser seguidamente alisada e "moldada" em volta da perna.

2. Começando pela raiz dos dedos do pé, enrolar a ligadura sem apertar em volta do pé, do calcâneo e em seguida, ao mesmo tempo que enrola a ligadura a partir do tornozelo, dobrar a ligadura sobre si mesma em cada volta formado uma prega na frente da perna. Isto repete-se ao longo da perna até imediatamente abaixo do joelho. Em seguida pode aplicar-se uma ligadura compressiva elástica. Assim que se aplicar VISCOPASTE PB7 a perna deve ser coberta por uma ligadura ou penso para evitar sujar a roupa. Pode a ligadura de acordo com a necessidade. Pode ser usado, até 7 dias.


Efeitos indesejáveis possíveis: VISCOPASTE PB7 pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas. Foram notificados: • reacções cutâneas locais, tais como erupção cutânea, eritema, prurido e ardor.

Disponibilidade do Produto

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Código | Tamanho | Disponibilidade |
| 4948 | 7,5cm x 6m | Caixa de 1 unidade |
| Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, | | |

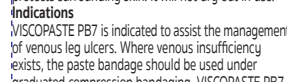

182 12 Danderyd, Ruotsi
™Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suécia.
™Marca Registrada Evolan Pharma AB
©Evolan Pharma AB
Data de emissão 08/2024 .
Fabricado na Roménia

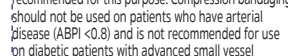

VISCOPASTE™ PB7

Çinko macun bandaj

Tanım
V

